


Filtering equipment, acc. to Morton, porosity S 2

Order code: **6632.442207002**

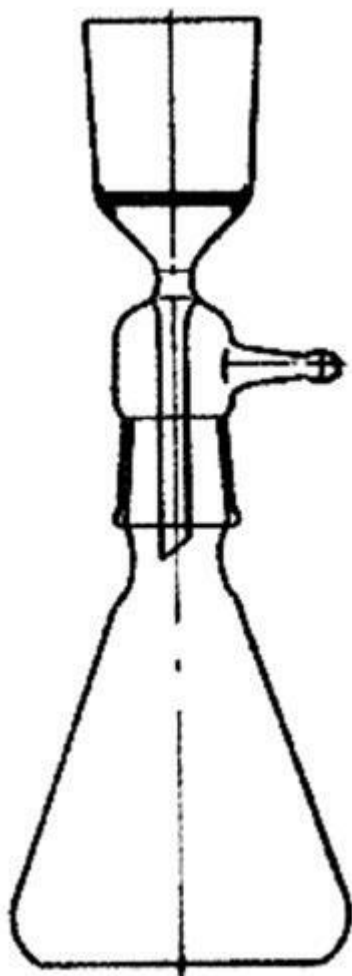

Cena bez DPH

153,10 Eur

Price with VAT

185,25 Eur

Parameters

Volume [ml]

250

Package [pcs]

1

Quantitative unit

ks

Skleněné fritové filtry se vyrábí z přesně tříděné drtě, z chemicky odolného boritokřemičitého skla SIMAX. Skleněná drť se po vytřídění upravuje do požadovaných tvarů a sintruje. Konečný výrobek je definován střední velikostí pórů udávanou v milimetrech a podle potřeby laboratorní praxe se vyrábí v třídách uvedených v tabulce. Destičky je možno zahřívát na teplotu 530°C. Zahřívání i ochlazování musí být pozvolné. Před prvním použitím nového filtru je nutno jím prosát horkou koncentrovanou kyselinou solnou a poté chladnou destilovanou vodou, aby se odstranily případné povrchové štěpinky a prachové částice. Prosává se větším množstvím vody při silnějším vakuu. Filtr je nutno čistit ihned po použití mechanicky (propláchnutím vodou), popřípadě chemicky (čínidlem, které sraženinu rozpustí). Kromě níže

uvedených výrobků lze dodat i jiné přístroje a zařízení se skleněnou fritou.